

# 分析天平通用型

## Adventurer™

经典系列，全新呈现

- ✓ 优异的性能
  - 60M ARM高速处理器
  - 环境滤波优化设置
  - 出色的微量加样技术
  - 最新的数字处理技术，快速获得稳定的称量结果
- ✓ 友好的操作界面
  - 左右巡航导向按键
  - 灵巧的SmarText™提示软件
  - 宽视角智能背光液晶显示屏，双行数据显示
- ✓ 独特的应用功能
  - 18种称量单位及自定义单位
  - 按键Beep声音
  - 数据同步采集工具DDE，无需安装程序，直接导入Word、Excel
  - 密度直读功能(适用于固体、液体、多孔材料等的密度测试)
  - 内置下挂式秤钩
  - 标配RS232通讯接口
  - 带日期和时间的GLP/GMP打印(内置时钟电池)
- ✓ 丰富的内置应用程序：计件称量、百分比称量、动态称量、密度直读、峰值保持



LCD双行显示，提供更多称重信息



数据采集工具DDE，轻松获得称量信息



背光显示

型号	AR64CN	AR124CN	AR224CN
量程(g)	65	120	220
可读性(g)		0.0001	
重复性(标准偏差)(g)		0.0001	
线性误差(±g)		0.0002	
典型稳定时间		4s	
校准	自动外部校准，配备砝码		
秤盘尺寸(mm)	Ø90		
秤盘上方有效高度(mm)	240		
天平外形尺寸(宽x高x长)(mm)	217x365x343		
净重/毛重(kg)	5.7/9.5		

# 精密天平通用型



LCD双行显示，提供更多称量信息



数据采集工具DDE，轻松获得称量信息


## Adventurer™

经典系列，全新呈现


- ✓ 优异的性能
  - 60M ARM高速处理器
  - 环境滤波优化设置
  - 出色的微量加样技术
  - 最新的数字处理技术，快速获得稳定的称量结果
- ✓ 友好的操作界面
  - 左右巡航导向按键
  - 灵巧的SmarText™提示软件
  - 宽视角智能背光液晶显示屏，双行数据显示
- ✓ 独特的应用功能
  - 18种称量单位及自定义单位
  - 按键Beep声音
  - 数据同步采集工具DDE，无需安装程序，直接导入Word、Excel
  - 密度直读功能(适用于固体、液体、多孔材料等的密度测试)
  - 内置下挂式秤钩
  - 标配RS232通讯接口
  - 带日期和时间的GLP/GMP打印(内置时钟电池)
- ✓ 丰富的内置应用程序：计件称量、百分比称量、动态称量、密度直读、峰值保持



计件称量

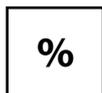


百分比称量

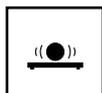

动态称量



密度直读

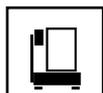

峰值保持



下挂式称量



GLP打印



时间/日期



背光显示

型号	AR153CN	AR223CN	AR323CN	AR423CN	AR423DCN	AR522CN
量程(g)	151	220	320	420	100/420	520
可读性(g)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001/0.01	0.01
重复性(标准偏差)(g)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001/0.01	0.01
线性误差(±g)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002/0.02	0.02
典型稳定时间	3s	3s	3s	3s	3s	2s
校准	自动外部校准，选购砝码					
秤盘尺寸(mm)	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø180
秤盘上方有效高度(mm)	170	170	170	170	170	-
天平外形尺寸(宽x高x长)(mm)	217x307x343					
净重/毛重(kg)	4.5/7.3	4.5/7.3	4.5/7.3	4.5/7.3	4.5/7.3	3.9/6.4

型号	AR1502CN	AR2202CN	AR3202CN	AR4202CN	AR4202DCN	AR4201CN
量程(g)	1520	2200	3200	4200	1000/4200	4200
可读性(g)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01/0.1	0.1
重复性(标准偏差)(g)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01/0.1	0.1
线性误差(±g)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02/0.2	0.2
典型稳定时间	2s					
校准	自动外部校准，选购砝码					
秤盘尺寸(mm)	Ø180					
天平外形尺寸(宽x高x长)(mm)	217x110x343					
净重/毛重(kg)	3.9/6.4					