




# 先行者™ 通用型天平



内校天平  
闪亮上市

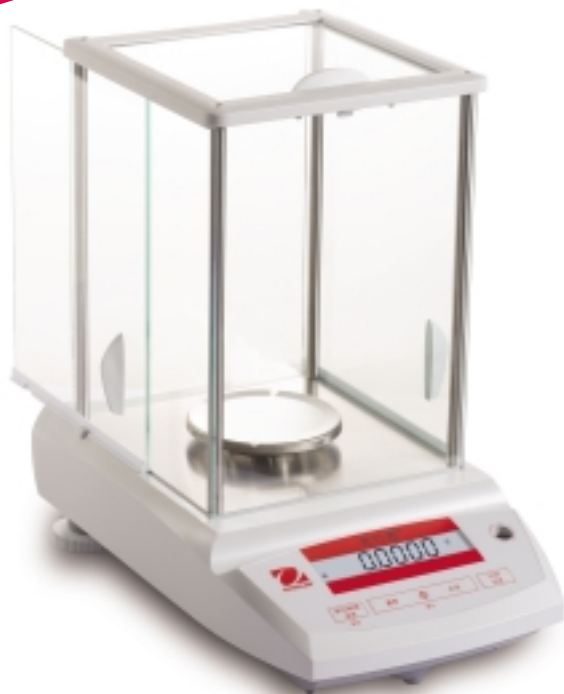

## 全新设计 优异性价比

奥豪斯公司新推出的先行者通用型天平，可广泛应用于实验室、工业和教育行业等领域。此系列天平不仅传承了奥豪斯天平的百年质量品质，更融入了全新的设计理念，充分考虑了中国用户的需求。先行者通用型天平全部配备不锈钢秤盘，延长了使用寿命，同时多组合设计的风罩也使您的称量操作更加方便，是您最经济理想的选择！

- **中文操作面板** – 使操作更加简单便捷
- **前置式水平调节泡** – 方便操作者对天平进行水平调节
- **多组合式风罩** – 5片玻璃无须任何工具就可轻松拆卸，充分满足您不同的称量需求
- **优化的微小加样称量** – 采用最新的数字处理技术，在保持天平读数稳定性的同时，大大提高对微量加量的响应速度
- **动态温度补偿功能** – 时时修正环境温度变化对称量结果的影响
- **独特的应用功能：**
  - ◆ 多种称量单位 – 毫克、克、千克、盎司、磅、克拉等及可自定义单位
  - ◆ 环境滤波优化设置 – 根据用户工作现场的环境特点，可对天平进行高、中、低滤波优化设置，从而使称量结果更快速、更稳定
  - ◆ 自动清零设置 – 环境的变化可能引起显示的漂移，自动清零设置可以保证即使环境有微小的变化，天平仍然保持从0克开始称量
  - ◆ 经典应用模式 – 计件称量和百分比称量
  - ◆ 内置下挂式秤钩 – 满足用户进行下挂式密度测定和其他特殊称量要求，如大体积样品的称量等
  - ◆ 标配 RS232 通讯接口 – 方便连接打印机、电脑和其他外围设备
  - ◆ 选配第二显示器 – 可同步显示天平上的称量值，方便数据的读取



# 先行者™ 通用型天平

| 外部校准型号              | CP64*       | CP114*      |             | CP214*      |             | CP153       | CP213       |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 内部校准型号              | CP64C       |             | CP124C      |             | CP224C      | CP153C      |             |
| 量程(g)               | 65          | 110         | 120         | 210         | 220         | 151         | 210         |
| 可读性(g)              | 0.0001      | 0.0001      | 0.0001      | 0.0001      | 0.0001      | 0.001       | 0.001       |
| 重复性(g)              | 0.0001      | 0.0001      | 0.0001      | 0.0001      | 0.0001      | 0.001       | 0.001       |
| 线性误差(g)             | 0.0002      | 0.0002      | 0.0002      | 0.0002      | 0.0002      | 0.002       | 0.002       |
| 准确度级别               | (I)         | (I)         | (I)         | (I)         | (I)         | (II)        | (II)        |
| 秤盘尺寸(mm)            | ø90         | ø90         | ø90         | ø90         | ø90         | ø120        | ø120        |
| 秤盘上方空间(mm)          | 210         | 210         | 210         | 210         | 210         | 185         | 185         |
| 外形尺寸(宽 x 高 x 长)(mm) | 196x310x320 | 196x310x320 | 196x310x320 | 196x310x320 | 196x310x320 | 196x287x320 | 196x287x320 |

\* 标配砝码

| 外部校准型号              |             | CP313       |             | CP413       |             | CP512      |            |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 内部校准型号              | CP223C      |             | CP323C      |             | CP423C      |            | CP522C     |
| 量程(g)               | 220         | 310         | 320         | 410         | 420         | 510        | 520        |
| 可读性(g)              | 0.001       | 0.001       | 0.001       | 0.001       | 0.001       | 0.01       | 0.01       |
| 重复性(g)              | 0.001       | 0.001       | 0.001       | 0.001       | 0.001       | 0.01       | 0.01       |
| 线性误差(g)             | 0.002       | 0.002       | 0.002       | 0.002       | 0.002       | 0.02       | 0.02       |
| 准确度级别               | (II)        | (II)        | (II)        | (II)        | (II)        | (II)       | (II)       |
| 秤盘尺寸(mm)            | ø120        | ø120        | ø120        | ø120        | ø120        | ø180       | ø180       |
| 秤盘上方空间(mm)          | 185         | 185         | 185         | 185         | 185         | -          | -          |
| 外形尺寸(宽 x 高 x 长)(mm) | 196x287x320 | 196x287x320 | 196x287x320 | 196x287x320 | 196x287x320 | 196x92x320 | 196x92x320 |

| 外部校准型号              | CP1502     | CP2102     |            | CP3102     |            | CP4102     |            |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 内部校准型号              | CP1502C    |            | CP2202C    |            | CP3202C    |            | CP4202C    |
| 量程(g)               | 1510       | 2100       | 2200       | 3100       | 3200       | 4100       | 4200       |
| 可读性(g)              | 0.01       | 0.01       | 0.01       | 0.01       | 0.01       | 0.01       | 0.01       |
| 重复性(g)              | 0.01       | 0.01       | 0.01       | 0.01       | 0.01       | 0.01       | 0.01       |
| 线性误差(g)             | 0.02       | 0.02       | 0.02       | 0.02       | 0.02       | 0.02       | 0.02       |
| 准确度级别               | (II)       | (II)       | (II)       | (II)       | (II)       | (II)       | (II)       |
| 秤盘尺寸(mm)            | ø180       | ø180       | ø180       | ø180       | ø180       | ø180       | ø180       |
| 秤盘上方空间(mm)          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 外形尺寸(宽 x 高 x 长)(mm) | 196x92x320 | 196x92x320 | 196x92x320 | 196x92x320 | 196x92x320 | 196x92x320 | 196x92x320 |

## 经典应用模式

**计件称量** – 此应用模式可计算单一重量物品的数量，天平通过已记录样品的单重值，称量多个样品时，天平会自动显示称量样品的个数，可用于库存控制、零件打包、验收、分配和计票等工作。先行者通用型天平不仅具有标准计数功能还具有平均单件重量最优化功能。

**百分比称量** – 广泛用于溶剂溶液配比的称量方法。在该模式下，先在秤盘上放上样品作为参考重量，参考重量将显示为 100%，而后放上的其他载荷将以与参考重量比较后的百分比方式显示。

## 附件(选配)



固体密度组件  
适用于分析天平



SF-F40S 打印机  
轻松打印称量信息



第二显示器  
方便数据读取



小巧清洁刷  
清洁天平好帮手

奥豪斯始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因，产品的技术规格亦会受到更改。奥豪斯公司保留修改的权利。如有变更，恕不另行通知。