

Model. AM200/300S-P/H

实验室电动搅拌机



结构紧凑型、高速串激式电机，
使用寿命更长、效率更高、低维护。




搅拌混合更强力，
专为实验处理高粘度介质设计。



组合式运行状态控制旋钮，
使实验操作更简便、控制更准确。



快捷式转夹头，
方便互换各种型式搅拌桨。

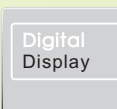

LED 数字显示转速、时间，
实验操作更精准，运行动态更直观。



电机过载、驱动故障报警功能，
保护实验设备的使用寿命。

产品概述

AM 200/300S-P/H 实验室电动搅拌机采用紧凑型高转速串激式电机驱动，适用于实验室生物、理化、化妆品、保健品、食品等的低至中、高粘度液体的混合搅拌。产品运行控制采用国际先进的数字化集成电路技术，运行状态由微处理器控制，能即时有效补偿因负载变化和电源电压波动而引起的转速变化，恒速可靠。组合式运行状态控制旋钮，使实验操作更简便，控制更精准。无级转速调节，满足实验中对搅拌转速随时修正。H型产品采用LED显示数字设置和实际输出转速和定时时间，保证实验数据直观采集。运行定时控制，确保实验的时间性有效可控。内置自动过载保护装置，保障实验长时间高负荷连续运行的安全；是科研机构、大专院校、卫生防疫和产品制造等进行科学研究、产品开发、品质控制及生产过程应用的理想实验设备。

产品优势



技术参数

		AM200S-P/H	AM300S-P/H
额定电压:	ACV	220 ± 10%	
额定频率:	Hz	50/60	
输入功率:	W	340	510
输出功率:	W	200	300
额定转矩:	N·m	1.45	1.96
转速控制:	级	无级	
转速范围:	rpm	50 ~ 1800	
数字显示:		否 / 是	否 / 是
转速动态检测:		否 / 是	否 / 是
定时功能:		否 / 是	否 / 是
转速记忆:		是 / 是	是 / 是
过载保护:		否 / 是	否 / 是
转夹头扭矩:	N·cm	142	196
转夹头夹持范围:	mm	2 ~ 13	
搅拌桨配置:	型式	扇片式	
处理量 (H ₂ O):	ml	50 ~ 40000	50 ~ 60000
最大处理粘度:	cP	100000	
允许环境温度:	℃	不大于 40	
允许相对湿度:	%	不大于 90	
整机外形尺寸:	mm	215 × 310 × 700	
整机重量:	kg	10	

混合精匀
昂尼仪器

适配搅拌桨

