




FA/JA/MA/MP 系列电子分析天平

FA/JA/MA/MP Series Electronic Analytical Balance

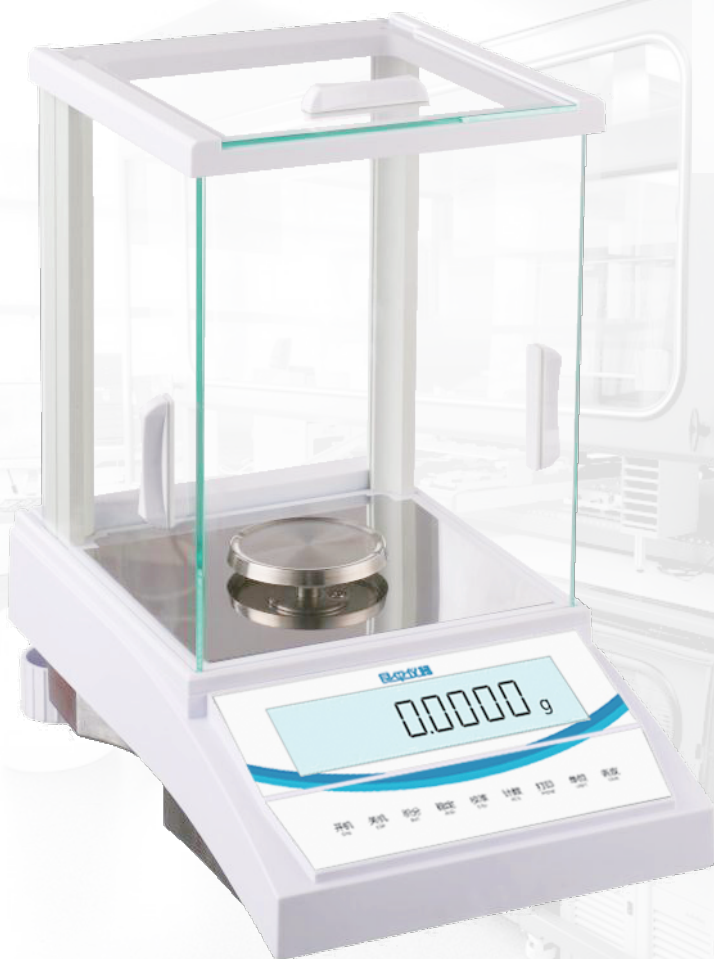

基于最为成熟机型

源自德国技术，经过多年改进及发展，现已成为国内电磁力平衡式电子天平代表产品之一。采用新一代的获专利一体连杆式电磁力平衡传感器，较同类产品，稳定度、线性、重复性显著提高。内部电路经过特殊优化，使用进口元件，提高了运算性能及抗干扰能力。

功能完备，操作简便

- › 具备全量程去皮功能
- › 具备置零功能
- › 具备计件功能
- › 具备累计称量功能
- › 具备单位转换功能
- › 具备自动校准功能（外部校准）
- › 灵敏度、稳定度可调
- › 配置水平仪，水平可调节
- › 配置高对比液晶显示屏
- › 选配密度测试组件
- › 配置 RS232 接口（USB 端子），可连接微型打印机或计算机

开机自检 故障自动报警

- › 开机自动全性能自检
- › 故障自动报警

型号 MODEL	主要参数 SPEC.	秤盘尺寸 PAN SIZE
FA1004	100g/0.1mg	ø80mm
FA1104	110g/0.1mg	ø80mm
FA1604	160g/0.1mg	ø80mm
FA2004	200g/0.1mg	ø80mm
FA2104	210g/0.1mg	ø80mm
FA2204	220g/0.1mg	ø80mm
FA3004	300g/0.1mg	ø80mm
JA1003	100g/1mg	ø80mm
JA1203	120g/1mg	ø80mm
JA2003	200g/1mg	ø80mm
JA3003	300g/1mg	ø110mm
JA5003	500g/1mg	ø110mm
JA10003	1000g/1mg	ø110mm
MA110	110g/0.1mg	ø80mm
MA200	200g/0.1mg	ø80mm
MP120-2	120g/1mg	ø80mm
MP200A	200g/1mg	ø80mm