

## 雪科电器—雪花制冰机规模型专业生产研发基地

常熟市雪科电器有限公司是一专业生产台式制冰机，商用制冰机，雪花制冰机的专业生产厂家，有全新的生产组装线二条，箱体发泡线一条，性能检测线一条，制冰机高低温试验室，减速电机动平衡试验室，制冰蒸发器试验台，理化实验室等测试设备，年生产各种规格制冰机及雪花制冰机能力达12万台。有较强的产品研发拓展能力，有全自动高精度无氟灌液台，多功能电性能测试仪，全自动无氟发泡机，真空泵等设备，现已形成三大系列共十多个型号的IM-15, IM-25, IM-50, IM-80, IM-100, IM-120子弹型冰和IM-22方冰制冰机及MS-20, IMS-30, IMS-40, IMS-50, IMS-70, IMS-85, IMS-100, IMS-130, IMS-150, IMS-200, IMS-250, IMS-300雪花型制冰机，特别是专为实验室设计的IMS系列雪花制冰机为公司重点产品，为国内规模型实验室制冰机生产研发基地，特别是新近开发的IMS-20, IMS-30小型雪花制冰机，填补了国内小型实验室雪花制冰机的空白，已申报国家科技创新项目。雪科系列雪花制冰机，广泛参与全国各大学实验室的制冰机招标工作，并屡屡中标。

雪科系列制冰机为全电脑程序控制，具有连续制冰，制冰速度快，制冰效率高特点，采用高效无氟压缩机，产品通过RoHS/CE认证，执行标准号为Q/320581FVD001-2014,并申报多项产品设计专利，公司为自理出口报检单位，产品全部通过技术监督检验所的测试。

产品广泛应用于宾馆，家庭，饭店，酒吧，超市及实验室，科研院所，大专院校，医疗单位等场合，在中国计量科学研究院热工所辐射研究室、北京清华大学化工学院、中科院地球化学研究所、中国科技大学生命科学学院等国内众多大学，科研院所的制冰机招标中屡屡中标。

出口的国家有：德国、沙特、印尼、以色列、韩国、南非、巴西、埃及、俄罗斯、印度、法国、智利、加拿大、西班牙、葡萄牙、澳大利亚、泰国、委内瑞拉、朝鲜、香港等国家和地区。

雪科系列雪花制冰机除参与国内众多大学、科研院所、实验室的招投标工作以外，还积极参与以色列、巴西、奥地利、印度等国家的制冰机投标工作。在制冰机品牌上追求高端品牌，压缩机采用ZLM技术的高效无氟压缩机，是国内唯一一家采用进口意大利Haitec二级减速器的实验室制冰机生产制造商。

严谨资深的研发团队，规模型严格精细的生产形式，高效务实诚信的销售模式，诚恳负责、人性化的售后服务体系，使得雪科雪花制冰机国内销售量一直处于行业领先地位。


- 国内唯一采用意大利技术的Haitec二级减速器的雪花制冰机生产制造商
- 独立研发国内最小的IMS-20实验室用雪花制冰机，填补国内空白
- 国内唯一专业生产实验室雪花制冰机的规模型研发生产制造商
- 雪科雪花制冰机，广泛用于全国各大学实验室、科研院所等单位
- 雪科系列制冰机，通过德国TUV公司CE安全认证
- 国内最早成立雪花制冰机研发中心和实验室制冰机投标事业部

### 雪科雪花制冰机，成功中标以下单位

- 中国光电国家实验室
- 国家医学生物重点实验室
- 国家生物医药高技术产业基地
- 重庆三峡学院(奥地利政府贷款项目设备)
- 中德财政合作昆明理工大学实验教学设备项目
- 国家陆地搜寻与救护基地
- 贵阳医学院通过美国进出口银行贷款的制冰机项目
- 国家鞋类质量监督检验中心
- 国家粮食局科学研究院
- 中国检验检疫科学研究院
- 中国极地研究中心(中国南极科考船)
- 中国政府援助乌干达诊疗医疗设备制冰机项目
- 中国国家纳米科学中心
- 中国援尼泊尔传统医药研究中心医疗设备项目
- 中国商务部援助柬埔寨动物检疫设备中的制冰机项目

**企业理念：诚信、开拓、进取、务实，质量第一，客户至上，不断追求最佳产品性价比。青山绿水，滢滢雪花，绢绢真情——雪科电器真诚地希望与您的合作。**

### 雪科制冰机CE证书(德国TUV公司颁发)

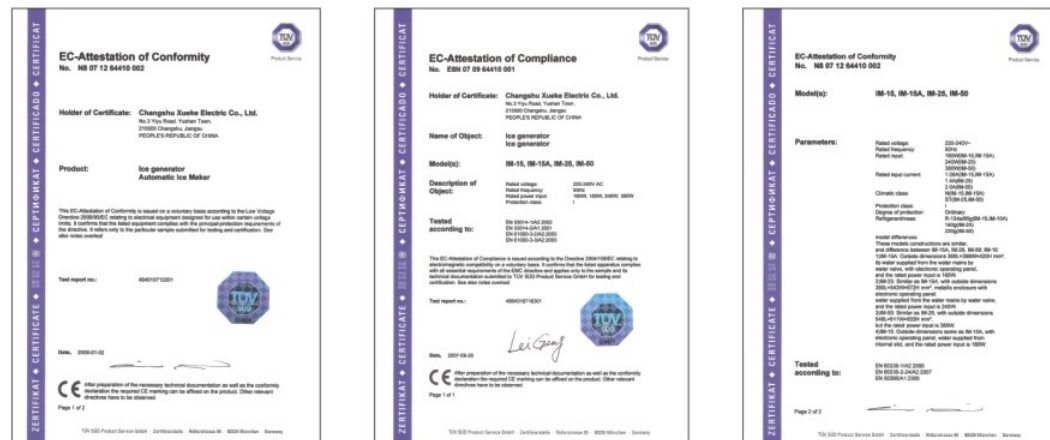

## IMS 系列雪花形制冰机 IMS series Automatic Flake Ice maker



### 雪科雪花制冰机性能特点：

- 1)采用优质不锈钢外壳，防腐耐用，独立型一体式结构，紧凑简洁,节省空间。
- 2)箱体隔热层为无氟聚氨酯发泡，保温效果好，内胆为无氟抑菌型，节能环保。
- 3)采用优质高效R134a无氟压缩机，零部件均经SGS公司检测，符合欧盟RoHS环保指令要求。
- 4)所用电器安全零部件均有“TUV”或“VDE”安全认证，认证零部件，安全可靠，产品通过德国TUV公司“CE”安全认证。
- 5)制冰过程采用全电脑程序控制，进口三星电脑芯片，控制可靠，运行平稳。
- 6)国内唯一采用意大利Haitec二级减速器及ZD电机，噪音低，运行平稳可靠。制冰机顶部设有散热孔及风机，保证减速器电机在高温恶劣条件下也能可靠运行。
- 7)国内唯一采用纯铜制冰蒸发器，304不锈钢搅刀，专利技术的行腔隔片式制冰蒸发器，制冷效率高，产冰量大。
- 8)螺旋滚刀挤压式制冰型式，结构紧凑，实现冰、水自动分离。冰刀刀口的优化设计，使得所制冰形细小实用。
- 9)独特的水箱浮球式进水系统，保证无残余水，无除冰过程、无水损耗，无残余水、节水节能。
- 10)有冰满显示，缺水显示，过冷保护显示，故障警告显示等保护性停机功能。制冰机冰满缺水时会自动停机，当来电来水时会自动开机，具有自动记忆恢复功能。
- 11)所制冰形为不定形的细小颗粒状雪花碎冰，冰形小，能渗入较窄间隙，冷却速度快，冰浴效果好，专为实验室设计。
- 12)前部设有电源开关和功能指示灯，周到详细的操作说明，使用直观方便，各项安全指标均经电性能测试通过，安全放心。
- 13)出厂前长时间的制冰性能检测和调试，保证了产品卓越优良的性能。
- 14)雪花形冰广泛应用于医院、学校、实验室、科研院所等场合以及超市食品保鲜、渔业捕捞冷藏、医疗应用、化工、食品加工等行业，应用范围广。





# XUEKE 雪科制冰机 — 实验室制冰机招标首选



IMS-60 IMS-70



IMS-85



IMS-100



IMS-130



IMS-150



IMS-200



IMS-250 IMS-300

## 雪科系列全自动雪花制冰机产品技术参数

机型	型号	制冰量 (kg/24h)	储冰量 (kg)	输入功率 (w)	冷凝方式	耗水量 (L/H)	压缩机/制冷剂	箱体外壳	箱体外形尺寸 (长X宽X高)(mm)	包装外净尺寸 (长X宽X高)(mm)	净重 (Kg)	毛重 (Kg)	冰型
雪花制冰机	IMS-20	20	10	180	风冷	≤0.8	高效无氟/R134a	304不锈钢	300X493X547	377×571×595	32	36	不规则的细小颗粒状的雪花碎冰
	IMS-25	25	10	180	风冷	≤0.8	高效无氟/R134a	304不锈钢	300X493X547	377×571×595	32	36	
	IMS-30	30	10	180	风冷	≤1.2	高效无氟/R134a	304不锈钢	300X493X547	377×571×595	32	36	
	IMS-40	40	15	280	风冷	≤1.6	高效无氟/R134a	304不锈钢	380X543X722	457×621×770	40	45	
	IMS-50	50	15	280	风冷	≤2.0	高效无氟/R134a	304不锈钢	380X543X722	457×621×770	40	45	
	IMS-60	60	25	420	风冷	≤2.5	高效无氟/R134a	304不锈钢	548X611X883	625×690×932	55	60	
	IMS-60	60	35	420	风冷	≤2.5	高效无氟/R134a	304不锈钢	635X611X945	712×690×994	70	76	
	IMS-70	70	25	420	风冷	≤2.9	高效无氟/R134a	304不锈钢	548X611X883	625×690×932	57	62	
	IMS-70	70	35	420	风冷	≤2.9	高效无氟/R134a	304不锈钢	635X611X945	712×690×994	70	76	
	IMS-85	85	25	420	风冷	≤3.5	高效无氟/R134a	304不锈钢	548X611X883	625×690×932	57	62	
	IMS-85	85	35	420	风冷	≤3.5	高效无氟/R134a	304不锈钢	635X611X945	712×690×994	70	76	
	IMS-100	100	25	420	风冷	≤4.1	高效无氟/R134a	304不锈钢	548X611X883	625×690×932	58	64	
	IMS-100	100	35	420	风冷	≤4.1	高效无氟/R134a	304不锈钢	635X611X945	712×690×994	70	76	
	IMS-100	100	55	420	风冷	≤4.1	高效无氟/R134a	304不锈钢	680X641X1102	757×720×1150	76	82	
	IMS-130	130	35	685	风冷	≤5.4	高效无氟/R134a	304不锈钢	635X611X945	712×690×994	70	76	
	IMS-130	130	55	685	风冷	≤5.4	高效无氟/R134a	304不锈钢	680X641X1102	757×720×1150	76	82	
	IMS-150	150	35	685	风冷	≤6.2	高效无氟/R134a	304不锈钢	635X611X945	712×690×994	70	76	
	IMS-150	150	55	685	风冷	≤6.2	高效无氟/R134a	304不锈钢	680X641X1102	757×720×1150	76	82	
IMS-200	200	55	805	风冷	≤8.3	高效无氟/R134a	304不锈钢	680X641X1102	757×720×1150	85	91		
IMS-250	250	55	1370	风冷	≤10.5	高效无氟/R134a	304不锈钢	680X641X1102	757×720×1150	98	104		
IMS-300	300	55	1370	风冷	≤12.5	高效无氟/R134a	304不锈钢	680X641X1102	757×720×1150	100	106		

# XUEKE 雪科电器 — 雪花制冰机规模型专业生产研发基地


雪科系列制冰机为全电脑程序控制，具有连续制冰，制冰速度快，制冰效率高等特点，采用高效无氟压缩机，产品通过RoHS/CE认证，执行标准号为Q/320581FVD001-2014，并申报多项产品设计专利，公司为自理出口报检单位，产品全部通过技术监督检验所的测试。

## ■ 台式制冰机

- 外观豪华，设计紧凑。
- 可制大、中、小三种规格的冰块。
- 全自动控制，使用方便。
- 高效无氟压缩机，经济节能。




IM-15

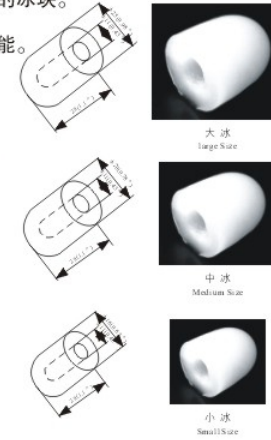

## ■ 方冰制冰机

- 外观豪华，设计紧凑。
- 全自动控制，使用方便。
- 高效无氟压缩机，经济节能。
- 冰块尺寸22X22mm

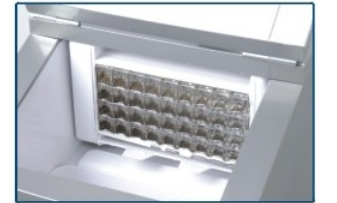

IM-22

型号	制冰量 (kg/24h)	储冰量 (kg)	输入功率 (w)	冷凝方式	压缩机/制冷剂	箱体外壳	箱体外形尺寸 (长X宽X高)(mm)	包装外净尺寸 (长X宽X高)(mm)	净重 (Kg)	毛重 (Kg)	冰型
IM-15	15	2	180	风冷	高效无氟/R134a	304不锈钢	300X368X378	355×435×425	14	18	子弹头
IM-22	22	2	200	风冷	高效无氟/R134a	304不锈钢	360X440X450	385×460×515	22	24	方冰

## ■ 颗粒子弹头制冰机

- 外观豪华，设计紧凑。
- 全自动控制，使用方便。
- 过载、缺水及冰满自动检测和保护的
- 高效无氟压缩机，经济节能。




IM-20 IM-25



IM-50 IM-70 IM-80



IM-100 IM-120

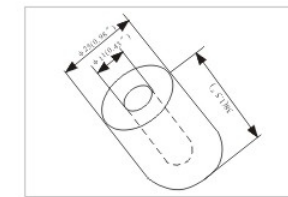

## 雪科系列全自动制冰机产品技术参数

机型	型号	制冰量 (kg/24h)	储冰量 (kg)	输入功率 (w)	冷凝方式	压缩机/制冷剂	箱体外壳	箱体外形尺寸 (长X宽X高)(mm)	包装外净尺寸 (长X宽X高)(mm)	净重 (Kg)	毛重 (Kg)	冰型
颗粒子弹头制冰机	IM-20	20	5	200	风冷	高效无氟/R134a	304不锈钢	330X503X607	400×574×655	26	30	颗粒子弹头冰
	IM-25	25	6	240	风冷	高效无氟/R134a	304不锈钢	380X543X672	457×621×720	30	35	
	IM-50	50	13	380	风冷	高效无氟/R134a	304不锈钢	548X611X833	625×690×882	47	52	
	KIM-50	50	25	380	风冷	高效无氟/R134a	304不锈钢	500X611X893	570×690×945	49	54	
	IM-60	60	25	400	风冷	高效无氟/R134a	304不锈钢	500X611X893	570×690×945	50	55	
	IM-70	70	25	400	风冷	高效无氟/R134a	304不锈钢	500X611X893	570×690×945	50	55	
	IM-80	80	16	650	风冷	高效无氟/R134a	304不锈钢	635X611X895	712×690×944	58	65	
	IM-100	100	55	680	风冷	高效无氟/R134a	304不锈钢	680X611X1050	755×690×1100	70	78	
	IM-120	120	55	750	风冷	高效无氟/R134a	304不锈钢	680X611X1050	755×690×1100	72	80	